



Equipos e Insumos Médicos Veterinarios

SISTEMA

DE CALEACCIÓN DE AIRE


El sistema automático de calentamiento de aire Warmair para uso veterinario consta de un módulo de gestión de temperatura de cinco rangos, un módulo interno de limpieza y desinfección, un módulo de purificación de aire caliente y otros componentes, como un cojín de aire reutilizable, un cojín de aire quirúrgico desechable y un cojín de aire para jaulas de mascotas impacientes.



ADVERTENCIAS ESPECIALES

- ✓ Este instrumento solo es aplicable a cirugías o tratamientos de rehabilitación en animales y está estrictamente prohibido su uso en cirugías humanas.
- ✓ Durante el uso de este instrumento, está estrictamente prohibido utilizar un cojín de aire calentador reutilizable o desechable que no sea el producto Warmair, ya que podría causar quemaduras graves.
- ✓ Cuando la luz de advertencia de sobrecalentamiento esté encendida o suene la alarma, se debe detener inmediatamente la operación o la rehabilitación; de lo contrario, podría causar quemaduras. Desconecte el cable de alimentación y contacte con el personal de servicio técnico.
- ✓ No se debe dejar a la mascota enferma sin supervisión cuando se requiera un calentamiento prolongado para una cirugía a fin de evitar posibles quemaduras.
- ✓ No se debe utilizar el instrumento para ningún tratamiento hasta que haya alcanzado la temperatura establecida.
- ✓ Después de que la máquina haya superado las 100 horas de uso, sonará un tono para recordar al personal que debe reemplazar el filtro HEPA.

PASO A PASO

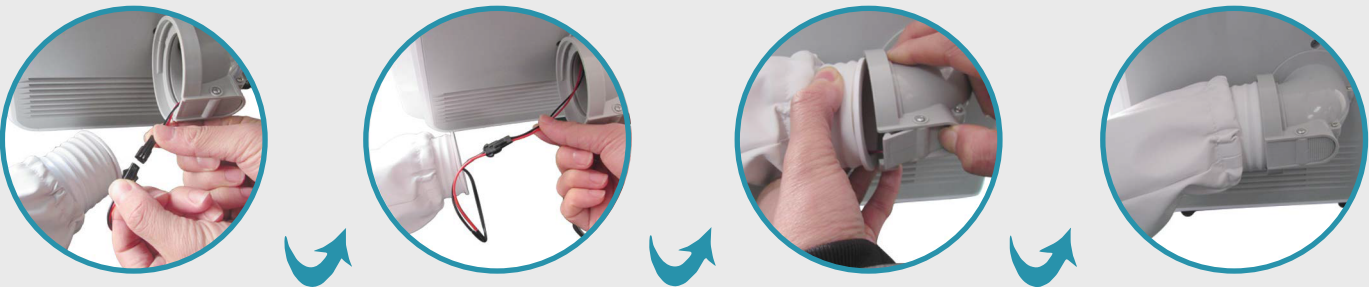

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADO	• Temperatura: 5 °C-28 °C • Humedad relativa máxima 80 % • Humedad relativa mínima 35 % • Altitud: Máxima 3200 m
PRESICIÓN DEL CONTROL DE TEMPERATURA	±0,1 °C
TIEMPO PARA ALCANZAR LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	De 2 a 8 minutos (dependiendo de la temperatura ambiente y del modelo del cojín de aire calefactor)
TEMPERATURA DE ALAACENAMINTO O TRANSPORTE	De -10 °C a 45 °C,
ALARMA DE SOBRECALENTAMIENTO	Si la temperatura es demasiado alta y supera los 44,9 °C, se encenderá la luz indicadora amarilla de sobrecalentamiento y sonará la alarma
SISTEMA DE FILTRADO	• Purificación y filtrado de aire de tres capas • Pantalla de filtro de aire HEPA eficiente de 0.2 um • Lámpara de esterilización UV eficiente de 254 nm • En el caso de iones negativos CC 5 V, 2 • 6 x 106 PCS/cm3 ± 10 %
CICLO DE REEMPLAZO DE FILTRO RECOMENDADO	100 horas después del uso
PTC DE CALEFACCIÓN	Resistencia de 700 W
CORRIENTE DE FUGA	Cumple con los requisitos de la norma IEC60601
VELOCIDAD DEL VENTILADOR	110 V/3540 RPM 220 V/945 RPM
VOLUMEN DE AIRE	2,7/3345 CMM/RPM
POTENCIA DEL VENTILADOR	45 w
RUIDO DEL VENTILADOR	49 dBA (alta velocidad) 43 dBA (baja velocidad)
PRESIÓN ESTÁTICA	110 V/26 mmAq 220 V/18 mmAq
GRADO DEL EQUIPO	110-120 V CA/50/60 Hz/11 A 220-240 V CA/50/60
CAPACIDAD DE RUPTURA	15 A, 12 A: 10 000 A (125 V CA) 8 A: 200 A (250 V CA)