

VA-900


VENTILADOR DE ANESTESIA

- ✓ Accionamiento por turbina.
- ✓ Consumo cero de oxígeno.
- ✓ Mejorado con modos de ventilación adaptados a la UCI.
- ✓ Monitorización del volumen corriente mínimo de 3 ml.
- ✓ Escenarios de uso generalizado.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fuelle: especial para animales pequeños y grandes (0-300 ml, 300-1500 ml).
- ✓ Pantalla táctil de 9 pulgadas.
- ✓ Interfaz del sistema de respiración: El ventilador está conectado al absorbedor de CO2.
- ✓ El ventilador, desde donde entra el aire y se convierte en gas de accionamiento mediante el sistema de turbina.
- ✓ Interfaz del cable de alimentación.
- ✓ Salida de gas de accionamiento: suministre gas al fuelle para que funcione.
- ✓ Salida de gases de escape inofensiva.
- ✓ Interfaz de escape: conecte el tanque de absorción de gases de escape para descargar los gases de escape.
- ✓ Entrada de gas de accionamiento: conecte la salida de gas de accionamiento para proporcionar gas para el fuelle.
- ✓ Interfaz USB de actualización de software.
- ✓ Interfaz del sensor de flujo: monitoree el parámetro de flujo.

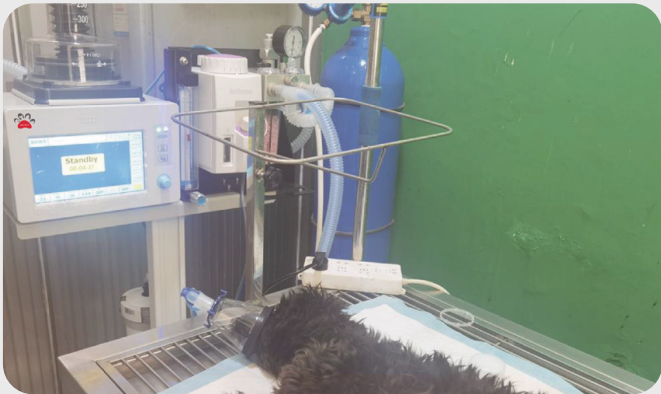

Hospitales veterinarios
y laboratorios



Investigación científica e
instituciones educativas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODO DE CONDUCCIÓN	Turbina y control electrónico
MODO DE VENTILACIÓN	VCV, PCV, CPAP/PSV, PRVC, SIMV-PC, VS, SIMV-PRVC, MANUAL
FUELLE	0-300 ml; 0-1500 ml
FORMA DE ONDA	presión, flujo, volumen, final de la espiración
BUCLE	presión-volumen/ presión-flujo/flujo-volumen
VOLUMEN CORRIENTE	control de la máquina3-1600 ml
MANUAL	5-1600 ml
I:E	1~100 lpm
TIEMPO DE INHLACIÓN	9.9:1 a 1:9.9
% DE PAUSA INSPIRATORIA	0-50%
PEEP	Apagado 3~20 cmH2O
PRESIÓN DE SOPORTE	0~60 cmH2O
CONTROL DE PRESIÓN	5~60 cmH2O
GATILLO DE CAUDAL	0.5~20L/minuto
GATILLO DE PRESIÓN	-1~-20

PANTALLA

